


# 10 設定を変更する

## 2 測定チケットの長さを変更する

測定チケットの長さを調節することができます。

「長い」に設定すると、用紙の下に余白ができます。測定した人の名前の記入や、管理者のハンコを押すのにご利用いただけます。表示パネルに「測定可能表示」が表示されている状態で変更できます。

ステップ 1

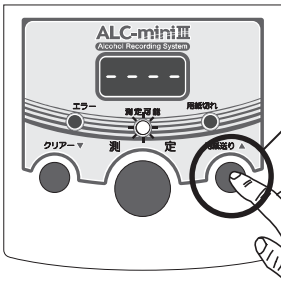


表示が点滅するまで押し続ける

用紙送りボタンを 10 秒以上長押しします。  
表示パネルの「----」が点滅したら、指を離します。

+u を使用している場合、表示パネルは「!d」と表示されています。

ステップ 2

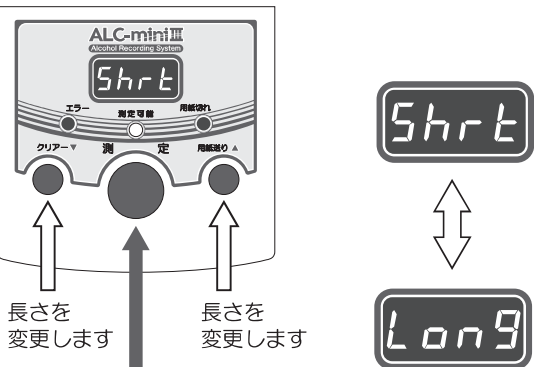


現在の用紙の長さが表示されます。  
標準設定は「短い (Shrt)」になっています。  
表示の切り替えは、以下のボタン操作で行えます。

- クリアー (▼) ボタンを押す
- 用紙送り (▲) ボタンを押す

※上記ボタンを繰返しまたは交互に押すことでも表示の切り替えが可能です。

用紙の長さが決定したら測定ボタンを押します。

ステップ 3

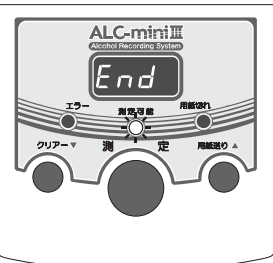

表示パネルに「End」と表示され、用紙の長さを変更されます。  
しばらくすると表示パネルが測定可画面に戻ります。